

# icatu 4.0

## PCA intelli

Bomba de Infusão Peristáltica



# icatu 4.0 PCA intelli

Bomba de infusão para **analgesia controlada pelo paciente.**


## INOVADORA COM 7 PROTOCOLOS

### CONTÍNUO




Manutenção contínua durante a infusão e sem dose de bolus

### CONTÍNUO + BOLUS

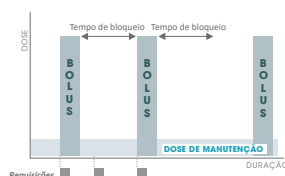


Manutenção contínua durante a infusão e bolus requisitado pelo paciente

### SOMENTE BOLUS

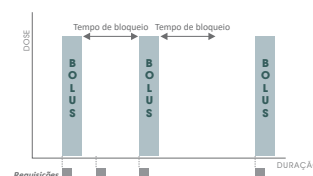


Dose administrada a cada requisição do paciente

### BOLUS + MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA

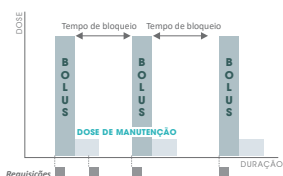


Dose de bolus requisitada, seguida por uma de manutenção temporária

### BOLUS + MANUTENÇÃO DECRESCENTE

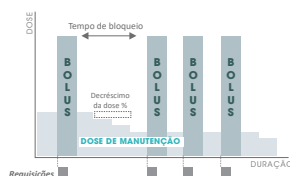


Valor decrescido da dose de manutenção quando inexistem requisições do paciente em determinado período

### BOLUS + MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

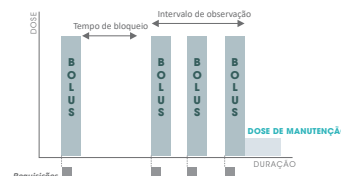

Manutenção temporária iniciada após requisições de bolus pelo paciente, dentro de intervalos

### BOLUS + BOLUS INTERMITENTE

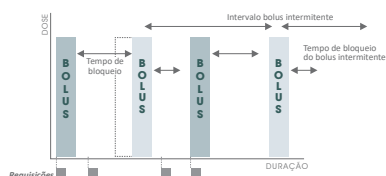

Bolus intermitente administrado com intervalos pré-definidos e bolus administrado a cada requisição do paciente

## Customize a terapia do paciente

Utilizando biblioteca de drogas parametrizadas ou incluindo novos fármacos

**MORFINA | METADONA | FENTANIL | ROPIVACAÍNA  
BUPIVACAÍNA | TRAMADOL | CLONIDINA | DEXMEDETOMIDINA**

# Conforto, Segurança e Precisão



## Versatilidade

9 modos de programação:  
permite outras aplicações  
no mesmo equipamento



Bloqueio  
do teclado  
**por senha**



Sensor de gotas  
**uso opcional\***

Botão  
de bolus  
**anatômico**



**Novo sensor**  
oclusão superior



**Chave de**  
segurança



Produto fornecido com **código UDI**  
(identificação única para produtos da saúde)

**Compatível com os softwares SamINTELLI® e SamMANAGER®.**

## APRESENTAÇÕES

CÓDIGO	MODELO
PB006551	icatu 4.0 PCA intelli WiFi
PB006561	icatu S 4.0 PCA intelli WiFi

*Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados Icaset®*

Consulte a linha de dispositivos de infusão Samtronic.

\*Sensor de gotas opcional apenas nos modelos S



[www.samtronic.com.br](http://www.samtronic.com.br)  
[contato.sp@samtronic.com.br](mailto:contato.sp@samtronic.com.br)



Acesse  
o canal  
do **YouTube**  
da Samtronic

**MATRIZ:**

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7750

**UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP  
Fone: +55 11 2490-1910

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7835

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:**

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE  
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



UM000220 REV00 05/22

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa icatu 4.0: 10188530084